

Specialanpassningar

Nima Kub Visco & Nima Kub Visco Plan

Våra dynor **handbyggs i Sverige** av flera olika typer av skum — viskoelastiska kuber, tryckfördelande skum och mjuka toppskikt som sätts samman för hand. Det gör att de **relativt enkelt kan specialanpassas** efter den enskilda brukarens behov. Vi har märkt att det är väldigt uppskattat av våra kunder — därför vill vi göra det enkelt att beställa, med den här guiden.

Ett fast pristillägg — alltid

Dynans ordinarie pris i avtalet + 800 SEK (i Norge + 800 NOK), exkl. moms och inkl. frakt — samma tillägg oavsett vilken ändring som görs.

Ett artikelnummer — alltid

Beställ alltid på SPC-artikelnr och beskriv sedan vad ni vill ha. Beskrivningen kan ni skicka via ert ordersystem, via mejl (order@nimacare.se) eller telefon (0046 70 635 50 70) — det viktiga är att vi förstår vad ni söker. Vi återkommer om något behöver förtydligas.

Ingen extra väntetid

Dynorna tillverkas lokalt i Sverige. En specialanpassad dyna byggs och levereras därför på samma leveranstid som avtalets ordinarie dynor.

Så beställer du

1

Beställ SPC-artikeln

för aktuell modell — se tabellen nedan.

2

Beskriv behovet

storlek och önskad anpassning, utifrån er bedömning eller sittanalys.

3

Vi bygger och levererar

på ordinarie leveranstid — dynan tillverkas i Sverige.

Artikelnummer

Art.nr	Produkt
KVSPC	Nima Kub Visco — specialanpassad/specialstorlek
KVINKSPC	Nima Kub Visco INK — specialanpassad/specialstorlek, med inkontinensskyddat överdrag
KVPSPC	Nima Kub Visco Plan — specialanpassad/specialstorlek
KVPINKSPC	Nima Kub Visco Plan INK — specialanpassad/specialstorlek, med inkontinensskyddat överdrag

Fast pristillägg: dynans ordinarie pris i avtalet + 800 SEK exkl. moms, inkl. frakt (Norge: putens ordinære pris i avtalen + 800 NOK eks. mva., inkl. frakt) — samma tillägg oavsett anpassning, även specialstorlek.


Exempel på vad vi kan göra

- **Alla möjliga storlekar** — det vanligaste behovet är en storlek som inte finns i avtalet
- Ta bort, förstora eller förlänga benstöd — eller göra dem i hårdare skum
- Ta bort eller höja bendelare
- Sänka dynan för ett eller båda benen — t.ex. för brukare som sparkar sig fram
- Kapa av dynan för ena benet
- Höja eller sänka hela dynan — tjockare mjukt toppskikt eller högre kuber
- Helt plan skiva under dynan, eller kraftigare avfasning

Exempel på anpassningar




Uppbyggnaden: viskoelastiska kuber, tryckfördelande skum och mjukt toppskikt — varje lager kan bearbetas individuellt.

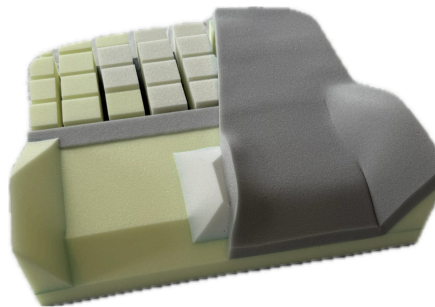

Toppskiktet formas om: bendelare och stödkonturer byggs upp under det mjuka toppskiktet.



Förhöjd bendelare med förstörade benstöd — vid behov i hårdare skum.

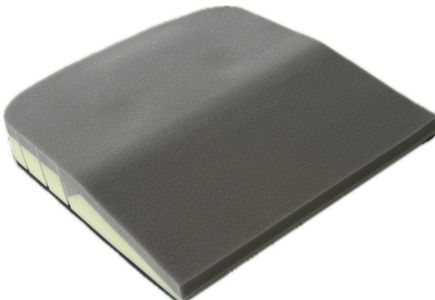

Dyna utan bendelare och benstöd — nedsänkt för båda benen.



Kapad dyna för ena benet — dynan byggs helt utan den ena bensektionen.



Olika höjder: dynan kan byggas i olika höjder beroende på behov.