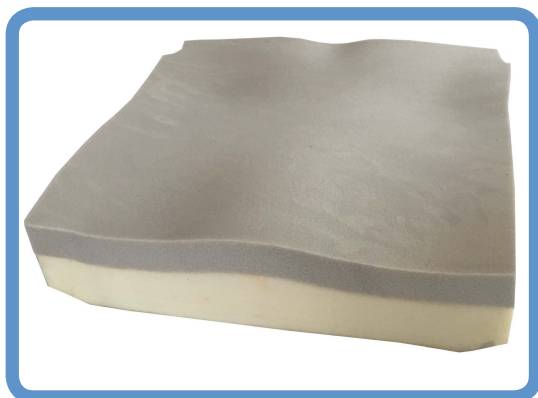




Dyna Nima 600 Visco

Tryckavlastande rullstolsdyna för smärtkänsliga brukare samt brukare med risk för trycksår. Dynan lämpar sig väl för brukare som sitter lång tid i dynan utan att kunna variera sittandet.

Bas av polyuretan formgjuten efter kroppen, toppskikt av 3,5 cm Viscoelastiskt skum.

Fakta / Teknisk dokumentation

Teknisk Specifikation/varudeklaration
Material

Dyna: Slabstocksgjuten polyuretan i dynbasen, högkvalitativt trögsaum i bakkant. Täckt av ett lager polyuretan som ångandas.

Överdrag: Polyestertyg

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745 **MD CE**

Kategori 04 33 03, ISO-kod: 04 33 03 Tryckavlastande dyna.

Märkt med EAN-13 streckkod

Vikt: 1-2,5 kg beroende på storlek

Förväntad livslängd 5 år

Dynan kan användas i andra sittmöbler men inte beskåras med bibehållen CE

Brukarvikt: Max 150 kg upp till och inklusive storlek 45x45 cm

Max 200 kg i storlek 45x45<50x45 cm

Max 250 kg i storlek 50x45 cm och över

Fasad i underkant för att passa väl i plan såväl som hängmattesits samt i hörnen bak för rullstolens rör.

Tvåtråd

Dynbasen kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej

tvättas i maskin. Dynbasen lufttorkas

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas

Brukarvikt

Max 150 kg upp till och inklusive storlek 45x45 cm

Max 200 kg i storlek 45x45<50x45 cm

Max 250 kg i storlek 50x45 cm och över.

Dynan kan beskåras med bibehållen CE

Dynan kan placeras i andra sittmöbler

Tvåtråd

Överdrag:

Tvåtråd

Dyna:



Beskrivning

Nima 600 Visco är en anatomiskt formad tryckavlastande dyna för brukare som behöver en mjuk, skön och tryckavlastande dyna. Dynan är anpassningsbar, (kan beskåras) för att passa rullstol och brukare.

Dynan är en vidareutveckling av vår Nima Standard 600 dyna då den har ett 3,5 cm toppskikt av viscoelastiskt skum ovanpå den formgjutna basen. Detta ger en mjukare, mer tryckavlastande och skönare sits. Brukaren sjunker ned i viscoskummet vilket ger ökad positionering och minskade skjuvkravter.

Dynan är ca 9 cm hög mätt under låret i framkant 5 cm in.

Överdraget och dynan åndas.

Produkten kommer färdig, inga inställningar behövs innan användning

Nima 600 Visco finns i storlekar som passar barn och vuxna samt tyngre brukare.

- Tillbehörsförteckning:

- Standard överdrag luftgenomsläppligt
- Inkontinensöverdrag
- Hygienhätta (Ink skyddad)

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner / Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. Dynan kommer färdig ur förpackning och behöver inte ställas in.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
4. Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare: Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.
5. 5. Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart