

Dyna Nima 600 Skikt

Tryckfördelande rullstolsdyna (AB)
Bas i polyuretan, toppskikt i kallsaum,
formgjuten efter kroppen.
Överdrag och bas som andas.
En stabil dyna för aktiva brukare.

Dynan är trycksårspåbyggande genom:

1. Dyna och överdrag andas.
2. Mjukt, tryckavlastande material.
3. Dynans form motverkar skjuv.

Beskrivning

Nima 600 skikt är en tryckfördelande dyna för aktiva brukare som inte behöver justering av sitsen. Dynan är anpassningsbar, (kan beskåras) för att passa rullstol och brukare. Dynan är passad både brukare som sitter kortare stunder såväl som brukare som sitter längre stunder i rullstol.


Dynan är en vidareutveckling av vår vanliga Nima Standard 600 dyna då den har ett 2 cm toppskikt av mjukt kallsaum ovanpå den formgjutna basen. Detta ger en mjukare, luftigare och skönare sits för de som sitter längre perioder på dynan.

Överdraget och dynan andas.
Dynan är anatomiskt formad och fördelar därmed brukarens vikt effektivt över hela sittytan.

Produkten kommer färdig, inga inställningar behövs innan användning

Nima Standard finns i storlekar som passar barn och vuxna samt tyngre brukare.

Dynan Kan beskåras med bibehållen CE samt placeras i övriga sittmöbler.

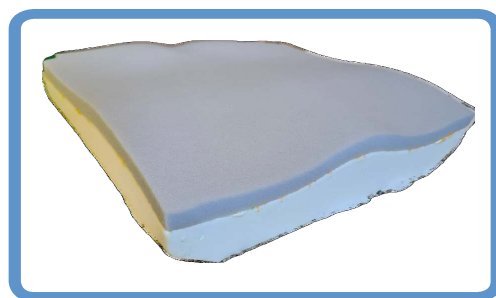

Nima 600 Skikt 45x45 cm Art nr: 600SKIKT4545 EAN 7333376002105

Fakta / Teknisk dokumentation

Material
Dyna: Slabstocksgjuten polyuretan i dynbasen, högkvalitativt PU skum som toppskikt.

Överdrag: Polyestertyg
Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16
Garanti: 2 år 
CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745
Kategori 04 33 03, ISO-kod: 04 33 03 Tryckavlastande dyna. Märkt med EAN-13 streckkod
Vikt: 1-2,5 kg beroende på storlek
Förväntad livslängd 5 år
Dynan kan användas i andra sittmöbler och beskåras med bibehållen CE
Brukarvikt:
Max 150 kg upp till och inklusive storlek 45x45 cm
Max 200 kg i storlek 45x45<50x45 cm
Max 250 kg i storlek 50x45 cm och över
Fasad i underkant för att passa väl i plan såväl som hängmattesits samt i hörnen bak för rullstolens rör.
Tvåtråd
Dynan kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin.
Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

- Tillbehörsförteckning:

- Standard överdrag luftgenomsläppligt
- Inkontinensöverdrag
- Hygienhätta

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringsanvisning

1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen. Dynan kommer färdig ur förpackning och behöver inte ställas in.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
4. Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare: Dynbasen torkas av med desinfektion alternativt med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Plantorka dynbasen i torkskåp eller
5. genom att låta den stå fritt. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.
- 5 Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart.